



اوژنول (گرید دارویی)

- ISO 13485
- ISO 18001-2007
- ISO 9001-2015
- ISO 10002-2014
- ISO 14001-2015
- ISO 10004-2012



تاریخ ثبت: ۱۳۸۸
 اداره کل نظارت و ارزیابی
 تجهیزات و ملزومات پزشکی
 شماره پروانه ساخت
 ۷۶۱۳۹۰۲۳
 IMD: 12613988

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:
 دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،
 بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.
 شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۳۳۸ | فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۱۹
 ایمیل: info@morvabon.com
 آدرس کارخانه: تهران، ۲۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم
 و فناوری پردیس، ساختمان سراج،
 طبقه دوم، واحد ۱۲۵ و ۱۳۶ و ۱۳۹
 شماره تماس: ۰۹۸۲۱۷۶۲۵۱۷۰۲ | فکس: ۰۹۸۲۱۷۶۴۸۱۴۵۷

اوژنول (گرید دارویی)

اوژنول مروابن، روغن ضد عفونی کننده ضد درد و التیام بخش می باشد. زمانی که با زینک اکساید مخلوط شود، بطور خاص برای موارد بسیاری بکار می رود.

ترکیبات:

روغن **اوژنول** خالص

کاربرد:

- ◀ درمان پالپ های باز و ماده ضد عفونی کننده ریشه دندان.
- ◀ انسداد موقت ریشه دندان در قسمتی از پالپ که رویاز است (بستن پالپ)
- ◀ ضد عفونی کننده ریشه دندان.
- ◀ درمان خشکی حفره که ممکن است بعد از استخراج ایجاد شود.

دستور العمل استفاده:

انسداد موقت:

- ◀ چند قطره از **اوژنول** را با پودر زینک اکساید بر روی یک قطعه اختلاط شیشه ای مخلوط کنید.
- ◀ با اسپاتول مخلوط کنید تا خمیر ضخیمی شکل بگیرد.
- ◀ حفره را آماده کنید و آن را بطور کامل خشک کنید.
- ◀ به روش متداول انسداد ایجاد نمایید.

ضد عفونی کردن ریشه دندان:

- ◀ ریشه دندان را به طور کامل پاک کنید.
- ◀ یک یا دو قطره **اوژنول** را با یک پی پت پلاستیکی در محل بریزید.
- ◀ هر گونه مایع اضافی را با یک گلوله پنبه ای پاک کنید.

احتیاط:

- ◀ قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- ◀ استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- ◀ هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ◀ از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری کنید.
- ◀ این محصول را تزریق نکنید.
- ◀ فقط برای مصارف دندان پزشکی استفاده شود.
- ◀ در صورت تماس با چشم: با مقدار زیادی آب شستشو داده شود. اگر سوزش ادامه یافت به مرکز پزشکی مراجعه شود.
- ◀ در صورت بلعیدن: مقدار زیادی آب خوراندن شود و به مرکز پزشکی مراجعه شود.
- ◀ در صورت تماس با پوست: با آب و صابون بشویید. اگر سوزش ادامه یافت به مرکز پزشکی مراجعه شود.
- ◀ از استعمال برای بیماران که حساسیت به روغن **اوژنول** دارند خوداری شود.

هشدار:

- ◀ محصول را دور از نور قرار دهید.
- ◀ در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ◀ محصول را پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی ظرف استفاده نکنید.
- ◀ در بسته بندی اصلی، در دمای محیط نگهداری شود.

منع مصرف:

- ◀ این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیماری های خاص منع مصرف ندارد و می تواند برای همه افرادی که به اوژنول حساسیت ندارند استفاده شود

اطلاعات محصول	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	محصول بدون نور
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	محصول در بسته بندی بهداشتی	محصول استریل نیست	این محصول فقط برای مصارف دندان پزشکی استفاده می شود	محصول بدون نور است



تهیه شده در شرکت مروابن
 ساخت ایران
 MORVABON.COM

EUGENOL (USP GRADE)

Morvabon **Eugenol** is an antiseptic, analgesic and sedative essential oil. When mixed with Zinc Oxide, it is specially recommended for many cases

Composition:

Eugenol Oil

Intended Use:

- ▶ Treatment of exposed pulp and for the disinfection of the root canal.
- ▶ Temporary obturation of the root-canal where pulp is partially exposed (pulp capping)
- ▶ Antisepsis of the root-canal
- ▶ Treatment of Dry Socket that may develop after extraction

Direction for Use:

Temporary obturation:

- ▶ Mix a few drops of Eugenol with Zinc Oxide powder on a glass mixing slab.
- ▶ Spatulate to form a thick paste
- ▶ Prepare the cavity and dry it thoroughly
- ▶ Obturate in the usual manner

Antisepsis of the root-canal:

- ▶ Clean the root canal thoroughly
- ▶ Insert one or two drops of Eugenol with a plastic pipette.
- ▶ Remove any excess liquid with a cotton pellet.

Precautions:


- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with **Eugenol**.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using **Eugenol**
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water.
- ▶ For dental use only
- ▶ Eye contact – flush with copious amount of water.
- ▶ Seek medical attention if irritation persists.
- ▶ Ingestion–Drink plenty of water and refer to medical centers.
- ▶ Skin contact – wash with soap and water. Seek medical attention if irritation persists.
- ▶ It is not recommended for patients with allergy to eugenol oil.

Warning:

- ▶ Protect from direct sunlight.
- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Store in the original container at room temperature.
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water. Do not induce vomiting. Seek medical advice.

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

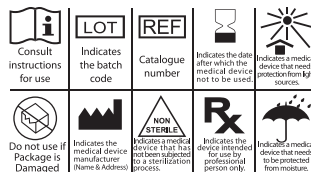

Produced by Morvabon Co.
www.morvabon.com
info@morvabon.com
Made in IRAN



EUGENOL (USP GRADE)

- ISO 13485
- ISO 9001-2015
- ISO 14001-2015
- ISO 18001-2007
- ISO 10002-2014
- ISO 10004-2012



Production
License No.
76139023
IMD: 12613988

manufacturer

Pardis Morvabon Pharmed Co.
Head Office: Unit 154, 7nd floor, 7 block,
Borjssaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 1438
Fax: 0098 21 6690 8819
Factory: Unit 135, 136, 139, 2nd floor, Seraj Bd.,
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran
Tel: 0098 21
Fax: 0098 21