



## محلول فرموکزول

جهت ضد عفونی کردن کانال ریشه در درمان اندودنتیکس

## محلول فرموکزول

جهت ضد عفونی کردن کانال ریشه در درمان اندودنتیکس

ترکیبات: کرزول، فرمالدهید، الکل

فرمو-کرزول جهت درمان پالپ های پوسیده و خراب یا نکروتیک مورد استفاده قرار می گیرد. فرمالدهید به عنوان عامل آنتی میکروبیال (میکروب کش) یا عامل تثبیت کننده عمل می کند و تمام بافت های غیرزنده را بی اثر و سخت کرده و به راحتی حذف می کند. کرزول به عنوان ماده ضد عفونی کننده موثر عمل کرده و همچنین تحریکات ایجاد شده توسط فرمالدهید را کاهش می دهد.

کاربرد:

مزایا:

احتیاط:

- قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- از استعمال برای بیماران که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود. در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- این محصول را تزریق نکنید.
- فقط برای مصارف دندان پزشکی استفاده شود.
- این محصول نباید برای افرادی که دارای حساسیت به فرمالدهید یا کرزول هستند استفاده شود.
- این محصول نباید برای افراد باردار بدون مشورت قبلی با پزشک استفاده شود.
- این محصول می تواند سوختگی های شدید پوست و مخاط را ایجاد کند

هشدار:


- بعد از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگه دارید
- درمای ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- از انجماد و نور مستقیم خورشید محافظت شود.
- این محصول غیر قابل تریق می باشد.

دستورالعمل استفاده:

- ضد عفونی کردن داخل کانال در دندان های ثابت: دندان را به وسیله رابردم جدا کرده. کانال و ابزار ها را تمیز و خشک نمائید. یک پنبه کوچک را با فرموکرزول خیس کنید. پنبه را فشار دهید تا مایع اضافی خارج شود. پنبه را در محفظه پالپ قرار دهید و حفره را با یک ماده پر کننده پر کنید. پس از حداقل ۴۸ ساعت پنبه را خارج کنید، سپس درمان اندو را کامل کنید.
- پالپوتومی فرموکرزول در دندانهای اولیه: دندان را به وسیله رابردم جدا کرده، پوسیدگی های قابل رویت را حذف کرده و سر پالپ را با یک قلم اکسکاواتور یا فرز برداشته سپس خونریزی را کنترل کنید و پنبه آغشته به فرموکرزول را به مدت ۵ دقیقه به طور مستقیم بر روی مدخل ریشه قرار دهید. سپس روی دندان را پانسمان کنید.

موارد منع مصرف:

- این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیمار های خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

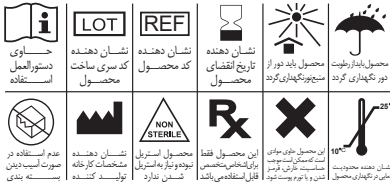

- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی
- ISO 13485 از US cert تحت نظارت IAS
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز، بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۸۱۹۳۸۰۰۸۱۹-۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۱۹

ایمیل: info@morvabon.com

آدرس کارخانه: تهران، ۳۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم

و فناوری پردیس، ساختمان سراج،

طبقه دوم، واحد ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۹

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۱۷۰۲-۰۹۸۲۱۶۶۵۱۷۰۲؛ فکس: ۰۹۸۲۱۶۶۴۸۱۴۵۷



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی  
اداره کل نظارت و ارزیابی  
تجزیه و تحلیل و آزمایشات پزشکی

## Formo-Cresol Solution

Indicated as a disinfectant and devitalizing solution used as part of endodontic treatment.

**Composition:** Cresol, Formaldehyde, Alcohol

### Indications:

Formo-Cresol is a preparation used in treatment of putrescent or necrotic pulps. The formaldehyde acts as a germicide or fixing agent and renders all devitalized tissue inert and leathery, permitting easy removal. The Cresol acts as an efficient antiseptic and also reduces any irritation that could be caused by the formaldehyde.

### Intended to use:?

### Advantage:?

### Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with Formo-Cresol Solution
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using Formo-Cresol Solution
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water. In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ Do not induce vomiting. Seek medical advice
- ▶ DO NOT inject this product
- ▶ For dental use only
- ▶ This product should not be used with individuals with known sensitivities to formaldehyde or cresol.
- ▶ This product should not be used with individuals who are pregnant or suspected to be pregnant without a prior physician consultation.
- ▶ This product can cause severe burns of skin and mucosa. Take precautions protect skin, mucosa and eyes during use.

### warning:


- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Store between 10°-25°C.
- ▶ Protect from direct sunlight and freezing.
- ▶ Do not use after the expiration date.

### Direction for use:

- ▶ Intracanal disinfection in permanent teeth: Isolate the tooth with a rubber dam. Clean, de-bridge and instrument the canals. Rinse and dry the canal spaces. Moisten a small cotton pellet with formocresol. Blot or wring any excess liquid from the pellet. Place the cotton pellet in the pulp chamber and seal the access hole with a temporary filling material. Recall the patient after a minimum of 48 hours and remove the pellet. Complete the endodontic treatment and restore.
- ▶ Formocresol pulpotomy in primary teeth: Isolate the tooth with a rubber dam. Remove visible caries. Remove the coronal pulp with an excavator or bur leaving the radicular pulp. Achieve hemostasis. Moisten small cotton pellets with fomocresol. Blot or wring any excess liquid from the pellet. Place the pellets directly on the radicular pulp stumps for 5 minutes. Place a base or a core in the tooth and restore.

### Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance (37% phosphoric acid) and blue dyes.

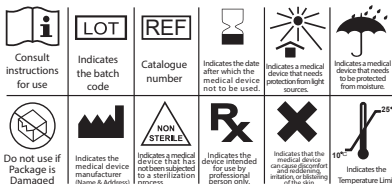

## Formo-Cresol Solution

Indicated as a disinfectant and devitalizing solution used as part of endodontic treatment.

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- Iso 9001: 2015, Tuv certification
- Iso 14001: 2015, Tuv certification
- Iso 18001: 2007, Tuv certification
- Iso 10002: 2014, Tuv certification
- Iso 10004: 2012, Tuv certification



MEDICAL  
EQUIPMENT  
DEPARTMENT

manufacturer  
Pardis Morvabon Pharmed Co.;  
Head Office: Unit 154, 7nd floor, 7 block,  
Borjsoz Bd. Azadi Street, Tehran, Province, Iran  
Tel: 0098 21 6658 1438  
Fax: 0098 21 6690 8819  
Factory: Unit 135,136,139, 2nd floor, Seraj Bd.,  
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran  
Tel: 0098 21  
Fax: 0098 21